



THE
**GLOBAL
SYMBOL**
FOR AN **AED**

Rotaïd
Solid Plus
**Proteggiamo
i vostri
defibrillatori**



ROTAÏD™
AED CABINETS

Rotaid Solid Plus

La nostra
mission...

Per Rotaid la mission è chiara...

"Saremo il simbolo globale per un defibrillatore salvavita ."

Proprio come un salvagente, che si trova in ogni porto, lungomare o piscina. Per raggiungere questo obiettivo, i nostri prodotti e la nostra azienda si appoggiano ai nostri principi e alle 3S:



Swift

Ogni secondo è importante durante un arresto cardiaco. Pertanto i nostri prodotti si trovano rapidamente, fanno risparmiare tempo quando vengono utilizzati e possono essere installati ovunque.



Simple

Se tutti possono usare un defibrillatore, le nostre teche devono essere intuitive, semplici e rassicuranti.



Sustainable

Utilizzando tecnologie all'avanguardia e materiali riciclati, i nostri prodotti soddisfano i più elevati standard in materia di responsabilità ambientale e sociale. Con la nostra configurazione modulare e materiali di lunga durata, i nostri prodotti sono efficienti dal punto di vista energetico.



"L'ispirazione di Rotaid è venuta dal salvagente:

"Tutti sanno a cosa serve e tutti possono usarlo!"

Solid Plus

Specifiche tecniche

Rotaid Solid Plus è una teca altamente robusta e durevole che garantisce una protezione ottimale e sostenibile del defibrillatore. La caratteristica forma rotonda e il suo design unico la rendono facile da trovare, e serve solo una rapida rotazione del coperchio per accedere al DAE. Il coperchio è dotato di loghi DAE e frecce direzionali per non lasciare spazio all'interpretazione.

La teca può essere aperta con una rotazione intuitiva che rimuove l'intero coperchio. Il soccorritore ha quindi pieno accesso al DAE che è fissato alla teca tramite una staffa, permettendo una presa rapida e semplice. Il coperchio è fissato alla piastra posteriore tramite una cintura per evitare la caduta del coperchio quando si apre la teca.

Il coperchio dotato di rientranze per una presa ottimale e frecce direzionali, è realizzato in 100% Policarbonato. Con uno spessore di 5 millimetri offre una protezione solida e garantisce un alto grado di resistenza all'acqua e alla polvere. Il coperchio è dotato di filtri UV per garantire una trasparenza duratura e il mantenimento prolungato del suo aspetto.





- 1. Staffe di supporto per DAE
- 2. Istruzioni per installazione
- 3. Sistema di allarme all'apertura
- 4. Finiture in carbon look
- 5. Solido gancio in acciaio
- 6. 100% plastica in policarbonato stabilizzata ai raggi UV (riciclata)



Standard di qualità leader di settore

IP56	Protezione da getti d'acqua, corrosione da salsedine e polvere.
IK10	Protetto contro un impatto di 20 joule garantisce la costruzione più solida possibile.
UV	Doppi filtri UV e stabilizzatori assicurano un aspetto di qualità di lunga durata.
Salsedine	Completamente protetto e resistente alla corrosione da salsedine e nebbia salina.
Interferenze	Nessuna interferenza con WiFi, Bluetooth o protocolli di comunicazione mobile per consentire la gestione di un DAE connesso.
Tested by experts	Tutti gli standard sono stati testati e certificati dall'ente di collaudo Eurofins (www.eurofins.com)

Colori disponibili

Verde bottiglia, Verde trasparente, Verde con banda gialla.



Solid Plus


Specifiche tecniche

Destinazione

Per uso in tutti gli ambienti interni.
Per uso esterno se le temperature non scendono sotto i 5 C°.

Dimensioni

Lunghezza	: 48 cm
Larghezza	: 48 cm
Profondità	: 18 cm
Peso	: 1,8 kg

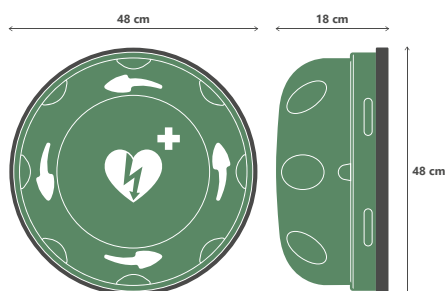

Piastra posteriore

- 100% Policarbonato, resistente ai raggi UV, carbon fiber-look finish
- Blocco di montaggio in ABS per posizionamento DAE
- 4 fori di montaggio ad incasso per il fissaggio alla struttura
- Guida e istruzioni per l'installazione stampate

Coperchio

- 100% policarbonato, resistente ai raggi UV, carbon fiber-look finish
- Adesivo con logo ILCOR AED bianco centrato, materiale con protezione UV
- 4 frecce per guidare l'utente
- 6 incanalature forniscono una solida presa per l'apertura
- Magnete a bassa potenza delle dimensioni di una moneta per l'attivazione dell'allarme

Allarme

- Alloggiamento ABS
- Volume regolabile : 84dB and 98dB
- Pulsante rosso per mettere temporaneamente in pausa l'allarme
- Alimentato da due batterie AA (incluse)
- L'allarme viene attivato immediatamente durante l'apertura dell'armadio

Modulare

Compatibile con tutte le marche e tipi di DAE.

Upgrade possibile con il sistema di riscaldamento Rotaid o il modulo di connettività Rotaid 24/7.

Contenuto confezione

Tutti i materiali di fissaggio, dima di installazione e manuale inclusi. Dimensioni scatola 50 x 50 x 25 centimetri.
Cartone certificato FSC, 100% riciclato



emd  **112**[®]
prodotti e formazione salvavita

ECHOES S.r.l.

Sede operativa:
Viale J. F. Kennedy, 121
0038 Scarperia e San Piero (FIRENZE)
Sede legale:
Via Savoia, 78 • 00198 Roma (ROMA)

T. +39 055/0511249 • T. +39 055/0511203
info@emd112.it • www.emd112.it



Certificate Approval N. 204475/A/0001/UK/ITN