



EASYFLOW

NCPAP

L'ACCESSORIO DEL SISTEMA DI
VENTILAZIONE NON INVASIVA
PER LA NEONATOLOGIA

MANEGGEVOLE

L'accessorio del sistema EasyFlow di Fritz Stephan GmbH si adatta in modo ottimale all'anatomia dei bambini prematuri e dei neonati. Le cannule o le maschere, dotate di un'ottima vestibilità, sono fondamentali per una ventilazione delicata e non invasiva. L'accessorio del sistema EasyFlow è facile da utilizzare e si integra perfettamente con i sistemi di ventilazione neonatale SOPHIE o STEPHANIE. Naturalmente, questo sistema sicuro e ben adattabile è anche compatibile con la maggior parte dei

ventilatori meccanici neonatali presenti sul mercato. L'accessorio del sistema, facile da usare, consiste in un nastro testa, un cuscinetto proteggifronte con o senza gel di silicone, base frontale, un applicatore con magnete e cannula o maschera. La lunghezza e l'altezza di cannula e maschera possono essere regolate in modo continuo tramite il magnete. Opzionalmente, è possibile collegare anche i tubi di disaccoppiamento e un nebulizzatore di farmaci.




APPLICAZIONE DELICATA

Tutti i componenti sono facili da utilizzare e si adattano in modo ottimale e personalizzabile all'anatomia del piccolo paziente. Le cannule nasali e le maschere sono disponibili in diverse taglie.

I nastri testa sono facilmente regolabili e si adattano alle diverse circonferenze della testa. EasyFlow nCPAP: vestibilità perfetta, delicata e sicura.

VESTIBILITÀ PERFETTA GRAZIE AL DESIGN ANATOMICO

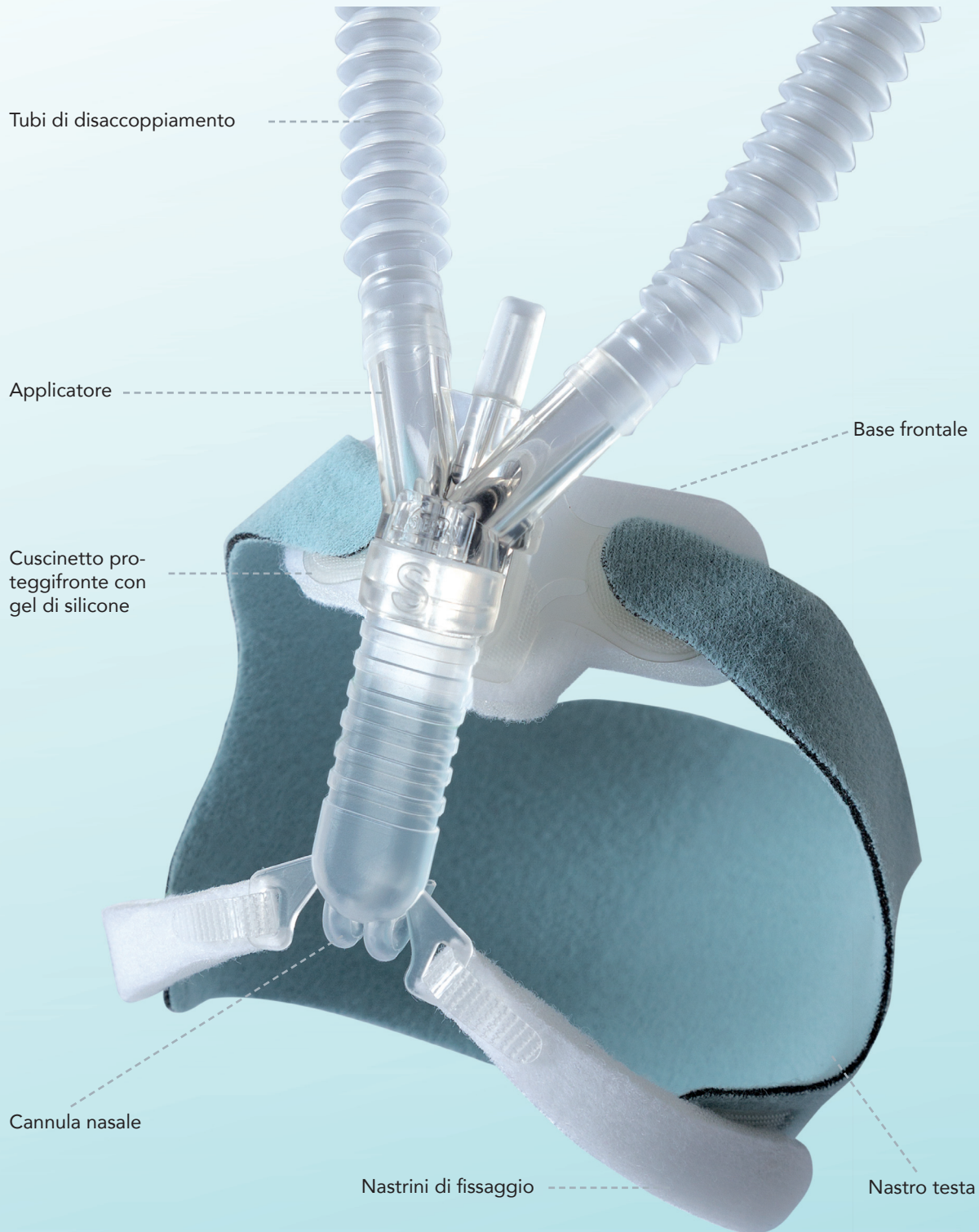

EASYFLOW

NCPAP



Il cuscinetto proteggifronte con gel di silicone aderisce direttamente alla pelle grazie alle sue proprietà adesive. Non richiede alcun fissaggio aggiuntivo con cuffietta o altro dispositivo.

Il gel di silicone biocompatibile non contiene plastificanti solubili. Il copricapo, disponibile in tre misure, può essere facilmente regolato in qualsiasi momento per garantire la massima vestibilità in base alla circonferenza della testa del paziente che cambia continuamente.

Il nastro testa consente solo l'allineamento delle cannule binasali o delle maschere per mezzo di nastri di fissaggio morbidi. Questi sono realizzati con un materiale che non irrita la pelle e sono dotati di chiusura in velcro per essere fissati alla cannula o alla maschera e al nastro testa. Il silicone di alta qualità, estremamente morbido e flessibile, garantisce il massimo in termini di comfort.

La cannula nasale consente di ridurre il rischio di irritazioni di pelle e mucosa e, grazie alla perfetta vestibilità del suo design anatomico, non poggia sul setto nasale evitando di gravare su di esso. Anche la maschera offre una vestibilità ottimale grazie al suo speciale design a soffiato ed è autosigillante. Al cuscinetto proteggifronte con gel di silicone autoadesivo viene appoggiato l'applicatore a cui sono agganciati i tubi, le cannule nasali o le maschere. Un magnete integrato regola l'applicatore alla base frontale con precisione millimetrica. In questo modo si garantisce un sollievo ottimale dalla pressione e dalla trazione.

I sistemi nCPAP rapidi e sicuri contribuiscono alla buona riuscita di una terapia di ventilazione non invasiva. Il nuovo cuscinetto proteggifronte con gel di silicone può essere applicato sulla pelle del neonato anche subito dopo la nascita. Potrebbe essere necessario ripulire parzialmente il sito di applicazione dalla vernix caseosa presente, ma non è necessaria altra preparazione. Le cannule binasali del sistema EasyFlow consentono quindi la somministrazione immediata e sicura della terapia nCPAP fino a quando è possibile trasferire il paziente in terapia intensiva per una cura più adeguata.

Non appena il paziente è ritenuto idoneo alle cure di routine, è possibile applicare i nastri testa flessibili che forniscono una terapia di ventilazione stabile e affidabile grazie ai nastri di fissaggio morbidi.

Questo tipo di fissaggio con nastro testa e base frontale posizionata in modo autonomo libera la testa del neonato dalla costrizione causata dalle tradizionali cuffiette, soprattutto se si sceglie una taglia non adeguata. Ovviamente, è sempre possibile utilizzare le nostre collaudate cuffiette codificate per colore in base alle 11 taglie disponibili.

Il materiale non irritante per la pelle si è dimostrato molto valido nell'uso clinico quotidiano e offre numerosi vantaggi.

Cuffiette EasyFlow nCPAP con una vestibilità perfetta, delicata e sicura.

PANORAMICA DEGLI ACCESSORI DEL SISTEMA

Cuffiette (fornite con base frontale e nastri di fissaggio)					
Taglia	Colore	Circonferenza testa	Peso	Quantità	Cod. art.
XS		20-22 cm	500-700 g	1	1 701 61 019
S		22-24 cm	700-900 g	1	1 701 61 020
M		24-26 cm	900-1.200 g	1	1 701 61 021
L		26-28 cm	1.200-1.600 g	1	1 701 61 022
XL		28-30 cm	1.600-2.400 g	1	1 701 61 023
XXL		30-33 cm	2.400-3.000 g	1	1 701 61 024
3XL		33-36 cm	3.000-4.200 g	1	1 701 61 025
4XL		36-39 cm	4.200-6.000 g	1	1 701 61 026
5XL		39-42 cm	6.000-7.300 g	1	1 701 61 027
6XL		42-45 cm	7.300-8.800 g	1	1 701 61 028
7XL		45-48 cm	> 8.800 g	1	1 701 61 029

Nastro testa con base frontale e due nastri di fissaggio			
Unità di imballaggio 1 (da utilizzare solo con la base frontale)			
Circonferenza testa	Peso in grammi (circa)	Taglia	Cod. art.
20-28 cm	500-1.350	micro	1 701 61 040
28-36 cm	1.350-3.700	mini	1 701 61 041
36-48 cm	3.700-8.400	maxi	1 701 61 042

	Quantità	Cod. art.
Cuscinetto proteggifronte con gel di silicone	5	1 701 61 018
Cuscinetto proteggifronte senza gel di silicone	5	1 701 61 017

	Cod. art.
Modello per dimensioni di maschere e cannule	1 701 60 020
Nastro di misurazione per circonferenza della testa e lunghezza del corpo	1 701 60 074

	Quantità	Cod. art.
Applicatore con magneti e tappo di chiusura a pressione	5	1 701 61 161
Set di tubi di disaccoppiamento, Ø 10 mm	5	1 701 63 408
Set di tubi di disaccoppiamento, Ø 12 mm (F&P)	5	1 701 63 409
Prolunga per maschera e cannula	5	1 701 61 000

Cannule		
Taglia	Quantità	Cod. art.
XXS	5	1 701 61 007
XS	5	1 701 61 006
S	5	1 701 61 001
M	5	1 701 61 002
L	5	1 701 61 003
XL	5	1 701 61 004

Maschere		
Taglia	Quantità	Cod. art.
XS	5	1 701 61 005
S	5	1 701 61 012
M	5	1 701 61 013
L	5	1 701 61 014
XL	5	1 701 61 015



Fritz Stephan GmbH Medizintechnik
Kirchstraße 19
56412 Gackebach
Germania



Tel. +49 6439 9125 0
Fax +49 6439 9125 111
E-Mail info@stephan-gmbh.com
Sito web www.stephan-gmbh.com